

THOMASCOLOR

Instrumentos para modelar cera



DESCRIPCIÓN

Instrumentos para modelar cera y composite en odontología estética. El mango fino y ligero de aluminio facilita la manipulación, y las puntas de trabajo, de acero inoxidable de alta calidad apto para uso en la cavidad oral, garantizan una mayor durabilidad y un desgaste mínimo.

ESPÁTULAS

Thomascolor 1 (amarillo) TC1

Escultor para cera, cerámica y acrílico, con mango recto. Autoclavable. Puntas acabadas en diferentes diámetros finos para facilitar el encerado.

Thomascolor 2 (verde) TC2

Escultor para cera, cerámica y acrílico, con mango recto. Autoclavable. Puntas acabadas en diferentes diámetros más gruesos para facilitar el encerado.

Thomascolor 3 (azul) TC3


Modelador para cera, cerámica, composite y acrílico. Autoclavable. Puntas de trabajo especiales para obturación.

Thomascolor 4 (rojo) TC4

Instrumento para modelar cera, cerámica, composite y acrílico. Puntas de trabajo de acero inoxidable endurecido para una mayor resistencia y durabilidad. Dos extremos con inclinación opuesta, ambos con un borde afilado para cortar el exceso de material.

Thomascolor 5 (gris) TC5

Instrumento para modelar cera, cerámica, composite y acrílico. Dos extremos curvos con puntas esféricas de 0,45 y 0,60 mm de diámetro. Puntas de trabajo de acero inoxidable endurecido para una mayor resistencia y duración, especialmente diseñadas para cortar el exceso de material y para el perfilado final de la pieza.

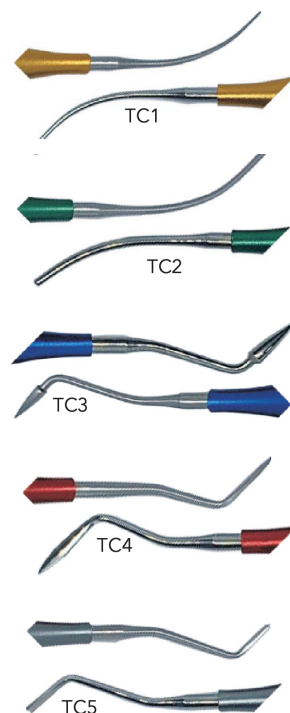

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

USO PREVISTO

Instrumentos de mano para modelar cera, composite, cerámica y acrílico en odontología estética y en el laboratorio dental.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Revisar el instrumento antes de cada uso. No utilizarlo si una punta de trabajo está dañada, doblada o suelta. Los bordes afilados del TC4 y el TC5 pueden cortar: manipular con cuidado.

LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

Instrumento reutilizable. Limpiar y esterilizar antes del primer uso y después de cada uso según el Manual Cleaning de SAFIDENT: esterilización por vapor, máximo 150 °C (300 °F).

¡No introducir en un limpiador de ultrasonidos!

MATERIAL

Mango: aluminio anodizado. Puntas de trabajo: acero inoxidable (endurecido en el TC4 y el TC5).

FABRICANTE

SWISS-DS-SAFIDENT, S.L.U. · C/ Ponent 10 · 43700 El Vendrell (Tarragona) · España · info@safident.eu · www.safident.eu

Producto sanitario de clase I. Solo para uso dental profesional.

