

GREENSTEIN

Instrumentos para el contorneado estético




Las restauraciones anteriores de composite muy detalladas requieren instrumentos diseñados específicamente para manipular y contornear el material correctamente, sobre todo en los márgenes cervicales.

El **mango dorado** tiene una paleta convexa para extender el composite sobre la superficie vestibular en diastemas y restauraciones de clase IV y clase V. La hoja larga, plana, fina y flexible facilita la colocación y la manipulación del composite en los espacios interproximales. Ayuda a restaurar la línea gingival y a dar forma al margen; la cucharilla flexible profunda se utiliza donde se necesita más contorno.

El **mango verde** ayuda a dar forma en la línea gingival: modela las concavidades linguales y forma la curvatura en el margen gingival.

El **mango azul** tiene un extremo en forma de hoja que permite recortar el exceso de composite y hacer surcos en el material para simular grietas del esmalte. Con la hoja opuesta se pueden crear ondulaciones antes de cortar, para una mejor reflexión de la luz. Recorta en los espacios interproximales y da forma a la superficie vestibular del diente.

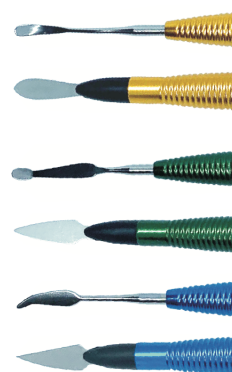

El extremo fijo del instrumento dorado tiene forma de cucharilla curva y robusta; su parte posterior es ideal para modelar las curvas de las concavidades linguales. La parte frontal se utiliza para formar la curvatura en el margen gingival o en la zona interproximal por lingual, y también puede servir para llevar el material a la preparación.

Estos instrumentos ligeros están muy recomendados para las restauraciones de composite. Las puntas finas y flexibles (extremos negros) son especialmente útiles con los composites fotopolimerizables. Cada instrumento tiene su función: el dorado ayuda a restaurar la línea gingival y a dar forma al margen, el verde ayuda a dar forma en el margen gingival y el azul recorta en los espacios interproximales o da forma a la superficie vestibular del diente. Los extremos planos contornean las superficies dentales y el borde fino se utiliza para crear efectos estéticos de luz. Las puntas flexibles del extremo de plástico negro se pueden sustituir.



El extremo recambiable (punta negra) del instrumento dorado tiene forma de espátula y está diseñado para las superficies vestibulares de los incisivos superiores y de los dientes posteriores, o para cualquier superficie amplia y redondeada. Es excelente para adaptar un margen gingival y también para formar la curva suave hacia la zona interproximal y el borde del diente.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

USO PREVISTO

Instrumentos de mano para colocar, modelar y contornear materiales de restauración de composite en restauraciones anteriores y posteriores.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Revisar el instrumento antes de cada uso. No utilizarlo si un extremo de trabajo está dañado, suelto o deformado. Sustituir las puntas flexibles desgastadas.

LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

Instrumento reutilizable. Limpiar y esterilizar antes del primer uso y después de cada uso según el Manual Cleaning de SAFIDENT: esterilización por vapor, máximo 150 °C (300 °F).

¡No introducir en un limpiador de ultrasonidos!

MATERIAL

Mango: aluminio anodizado. Extremos de trabajo: acero inoxidable. Puntas flexibles recambiables: plástico sobremoldeado sobre acero inoxidable.

FABRICANTE

SWISS-DS-SAFIDENT, S.L.U. · C/ Ponent 10 · 43700 El Vendrell (Tarragona) · España · info@safident.eu · www.safident.eu

Producto sanitario de clase I. Solo para uso dental profesional.

